

Armoires de stockage – cuve sécurisée


FK/G Positives / Négatives / Combinées



FKEX 5000



Tablette verre réglable sur toute la hauteur de la cuve (tiroirs transparents en plus pour CUPex et GEX)

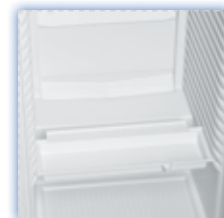

Dégivrage automatique avec bac de récupération d'eau interne (dégivrage manuel pour GEX).



Cuve sécurisée pour stockage de produits volatiles non corrosifs - Agrée ATEX 3500X. EX II 3G EEX nA II T6 conformément à la directive 94/9 CE pour FKEX.



Carrosserie robuste en époxy blanc. Cuve ABS avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage.



Les armoires Liebherr fonctionnent avec un fluide frigorigène écologique



Porte réversible avec fermeture à clé (en option sur CUPex et GEX)

> LES CARACTÉRISTIQUES

- Refroidissement statique - non qualifiable laboratoire.
- Compatibles pour ambiance +10° à +30°C.
- Régulation électronique avec fonction marche continue, alarme sonore pour évaluation de température et ouverture de porte (GEX 1366/2713/5216).
- Thermostat position arrêt sur bandeau (FKEX)
- Agencement modulable. Tablettes verre. Tiroirs transparents GEX et CUPex.

- GEX 821 à poser sur pailleasse.
- GEX 1366 (hauteur 850 mm) enchâssable sous pailleasse.
- Fluide R600a.
- Alimentation 230V - 50Hz.
- Conformés à la réglementation CE - ISO9001 - ISO14001.

> LA GAMME



FKEX 3600



CUPex 3503



GEX 1366

> DONNÉES

Armoires de stockage positives +2° à +10°C (température moyenne +5°C homogénéité / stabilité env. +/-4°C – non garanti)

Référence	Volume brut / utile (l)	Equipement	Puissance raccordée (W)	Consommation (kWh/24h)	Dimensions appareil : L x P x H (mm)	Poids brut / net (kg)
FKEX 1800	180	3 tablettes (lxp) mm 540x405	120	0,9	602x600x884	38/36
FKEX 2600	260	4 tablettes (lxp) mm 540x405	140	1,0	602x600x1215	47/44
FKEX 3600	360	5 tablettes (lxp) mm 540x405	150	1,1	602x600x1589	62/58,5
FKEX 5000	500	5 tablettes (lxp) mm 675x505	150	1,1	755x715x1515	78/73,5

Armoires de stockage négatives -18° à -25°C (température moyenne -20°C +/-7°C – non garanti)

Référence	Volume brut / utile (l)	Equipement	Puissance raccordée (W)	Consommation (kWh/24h)	Dimensions appareil : L x P x H (mm)	Poids brut / net (kg)
GEX 821	80/67	2 tiroirs	100	0,7	553x610x630	34/32
GEX 1366	141/101	4 tiroirs	100	0,82	555x625x850	44/42
GEX 2733	232/226	7 tiroirs	100	1,0	600x631x1644	79/74
GEX 5216	513/472	14 tiroirs	180	1,15	750x760x1725	111/105

Armoires de stockage combinées + 3° à + 8°C / Congélateur - 20°C (température moyenne +5°C +/-4°C et -20°C +/-7°C homogénéité / stabilité - non garanti)


Référence	Volume brut / utile (l)	Equipement	Puissance raccordée (W)	Consommation (kWh/24h)	Dimensions appareil : L x P x H (mm)	Poids brut / net (kg)
CUPEX 3503	328/323	3 tablettes verre / 3 tiroirs congélation	130	0,95	600x637x1817	77/70

Accessoires

AMÉNAGEMENT	
Référence	Désignation
9 293 691	Tablette verre FKEX 1800 / 2600 / 3600 - (lxp) 540x405 mm
9 293 689	Tablette verre FKEX 5000 - (lxp) 675x505 mm

Options

Référence	Désignation
OP 9	Tube / logement pour sonde GTC (PT 100)
OP 35	Alarme 2 pts – sonore et visuelle + report et réserve de marche - montée sur dessus
OP 1/1	Serrure - GEX
OP 1/2	Serrure appareil 2 portes - CUPex



Agence Nord :
 Plug N'Work - Campus Effiscience
 2 Rue Jean Perrin - Bât D
 14460 Colombelles
 Tél: 02.31.34.50.74 Fax: 02.31.34.55.17

Agence Sud :
 Hôtel d'Entreprises de La Croix Rouge - Lot A4
 10 Av de la Croix Rouge - 84000 Avignon
 Tél : 04.90.27.17.95 Fax : 04.90.27.17.52

www.deltalabo.fr