

DIGITAL CONTACT ANGLE



GIBERTINI

DCA400

Agence Nord:

ZA Object'ifs Sud - Lot A3
6 Allée Emilie du Châtelet
14123 Ifs
tél : 02.31.34.50.74
fax : 02.31.34.55.17




Agence Est:

Parc Club des Tanneries
2 Rue de la Faisanderie
67380 Lingolsheim
tél : 03.88.04.01.81
fax : 03.68.93.01.52

Agence Sud:

Bât Le Venango, 392 Rue Jean Dausset
AGROPARC - BP11575
84916 Avignon Cédex 9
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52


www.deltalabo.fr
info@deltalabo.fr

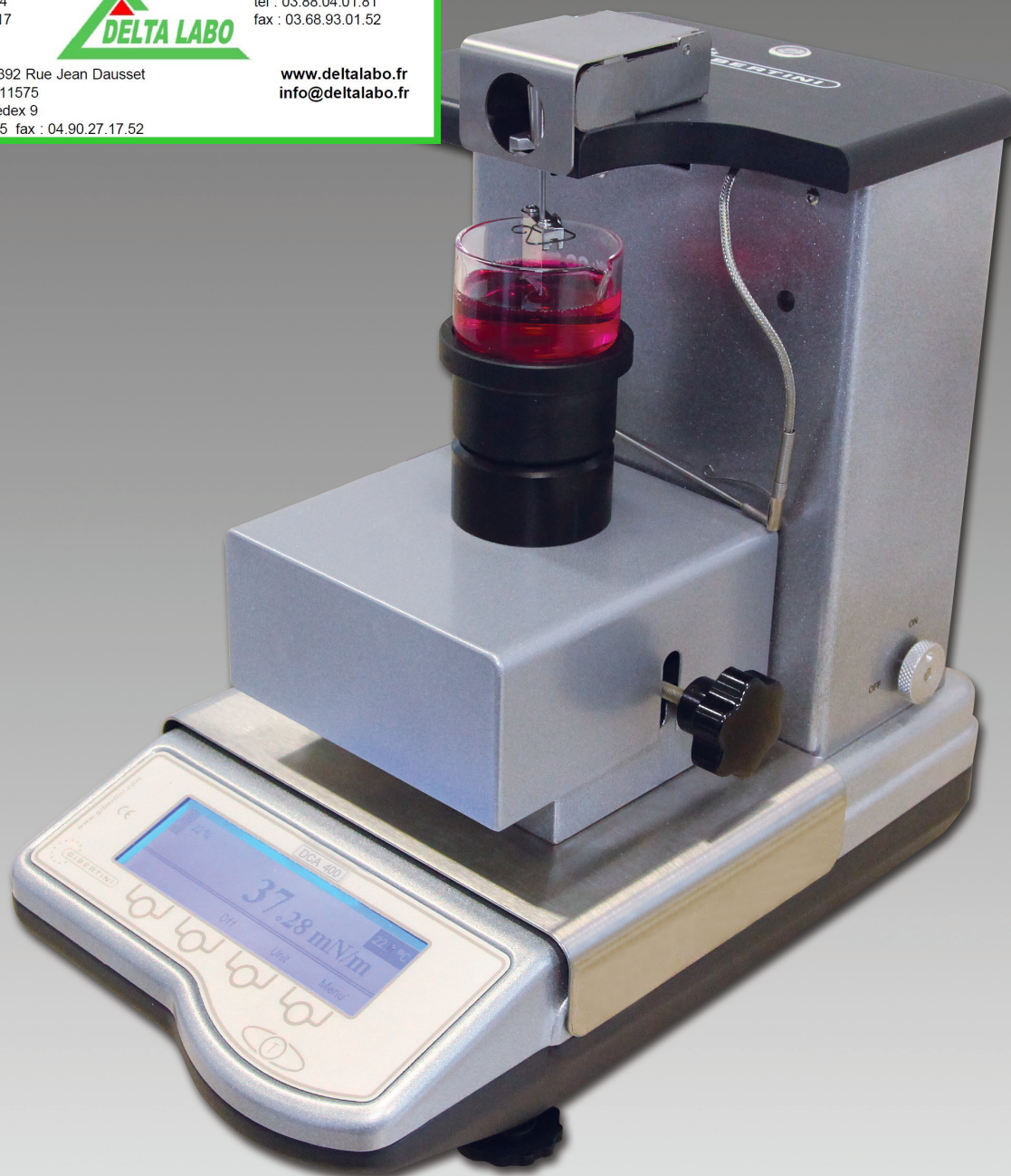


laboratory
balances



industrial
scales

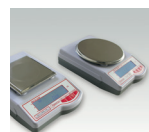

instruments
for paint

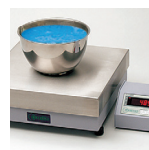

oenological
equipments



digital
tensiometer



laboratory electronic balances & oenological equipments



customer care

info@gibertini.com

Tel. (+39) 02 3541434

GIBERTINI ELETTRONICA SRL

Via Bellini, 37
20026 Novate Milanese
(Milano) - ITALY
Tel. (+39) 02 3541434
Fax (+39) 02 3541438
sales@gibertini.com

www.gibertini.com

ISO 9001:2015



LAT N° 094 RMP N° 094

Il Centro ACCREDIA LAT n. 094 è accreditato per tarature di bilance e di microdosatori.
Il Centro ACCREDIA RMP n. 094 è accreditato come produttore di materiali di riferimento (soluzioni idroalcoliche). Per i dettagli consultare le tabelle di accreditamento su www.accredia.it.

ACCREDIA LAT Center n. 094 is accredited for balances and microdosimeters calibration.
ACCREDIA RMP Center n. 094 is accredited as reference material producer (hydroalcoholic solutions).
For details consult the accreditation tables on www.accredia.it.

calibrated
masses



DIGITAL TENSIOMETER

Mod. DCA400

DIGITAL TENSIOMETER

- Display of surface tension value expressed in mN/m (dyne/cm) measured with the Wilhelmy method
- Precision: ± 0.02 mN/m (dyne/cm)
- Capacity: 1-1000 mN/m resolution 0.01 mN/m
- Max capacity: 110 g
- Autocalibration with internal mass
- Contact angle 0-180 degrees
- Dimensions: 210x370x380
- Weight: 8Kg.

EQUIPMENT

- Glass plates (dimensions 24x24x0.15 mm)
- Suspended system for the arrangement of glass plate
- Glass container for liquid sample
- manual adjustable lab jack

Software with the following performances:

contemporaneous display on PC:

- force changes during the measurements
- past time
- surface tension value

data recording (useful for other elaborations)

changing value of perimeter plate (if different from the standard)

Automatic jack with programmable speed (from 21 to 1000 $\mu\text{m/s}$)

ACCESSORIES INCLUDED

Platinum Wilhelmy plate

Platinum Du Nouy ring

Floater calibrated in weight and in volume and double wall cylinder for density measurement:

- range of measure for the density: $0.5 \div 2.25$ g/cm³
- readability: 0.00005 g/cm³
- precision and reproducibility: ± 0.00005 g/cm³

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Power supply 100/240 VAC by external power supply, 502 Hz

Consumption: 10 VA

Specific container for sample thermostatisation

Special plate for metrological control

Subject to technical changes without notice.

All our instruments are to be used exclusively for scientific purpose and/or for internal control only. They must not be used in environments with danger of explosions.

The use of our balances is forbidden in the cases provided by art. 1, point 2, letter a) of directive 2014/31/UE except for those models approved with CE mark (legal metrology).

Electronic balances are sensible to the variation of the acceleration of gravity. They must be calibrated on the working site (2014/31/UE).

All our instruments comply with directive 2004/108 UE (electromagnetic compatibility)

May 2018