

Agence Nord:
ZA Object'ifs Sud - Lot A3
6 Allée Emilie du Châtelet
14123 Ifs
tél : 02.31.34.50.74
fax : 02.31.34.55.17



Agence Est:
Parc Club des Tanneries
2 Rue de la Faisanderie
67380 Lingolsheim
tél : 03.88.04.01.81
fax : 03.68.93.01.52

Agence Sud:
Bât Le Venango, 392 Rue Jean Dausset
AGROPARC - BP11575
84916 Avignon Cédex 9
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52

www.deltalabo.fr
info@deltalabo.fr

MINI CRUSHER - MINI JAW CRUSHER



The Mini CRUSHER is a portable, primary sample preparation system designed for single pass crushing of material up to 25mm, down to 1-2mm.

Able to be set up in minutes, almost anywhere, the system is safe and easy to use, providing the productivity you need for onsite sample preparation in your drilling and sampling program.

The Mini CRUSHER is suitable for a broad range of applications and materials including rock chips, coarse material drilling samples such as RC and blasthole, to metallurgical and environmental samples.

The Mini CRUSHER is powered using a 24V universal power supply, suitable for use in all countries, and includes industry standard safety features such electrical interlocks and E-Stop, to make it a safe, easy to use experience.

Crushing at fast speeds, typical processing of 1kg of RC drilling material is complete in 1.5 minutes. Samples then have direct input into the Mini MILL or are ideal for bulk spectral analytical techniques.

Key features

- Fast crushing, up to 0.5 kg/minute.
- Quick jaw adjustment
- Safety switch stops operation on cover opening
- Easy to clean and maintain

Technical specifications


- Initial size: < 25 mm
- Final fineness: < 2m or even finer
- Electrical: 110 or 240 VAC 50/60 Hz, 500 W
- Jaw width: 50mm
- Wear plates: Tungsten Carbide
- Dust extraction: 30mm Dust Outlet
- Dimensions: 408mm(D) x 424mm(W) x 500mm(H) - Weight: 26.8kg

Ordering information

- MC10: Mini Crusher. Includes: Tungsten Carbide Jaws, 240V/12V Adapter, Peli-case.

Shipping dimensions

- Dimensions Case: 650mm(D) x 500mm(W) x 380mm(H)
- Weight: 34kg

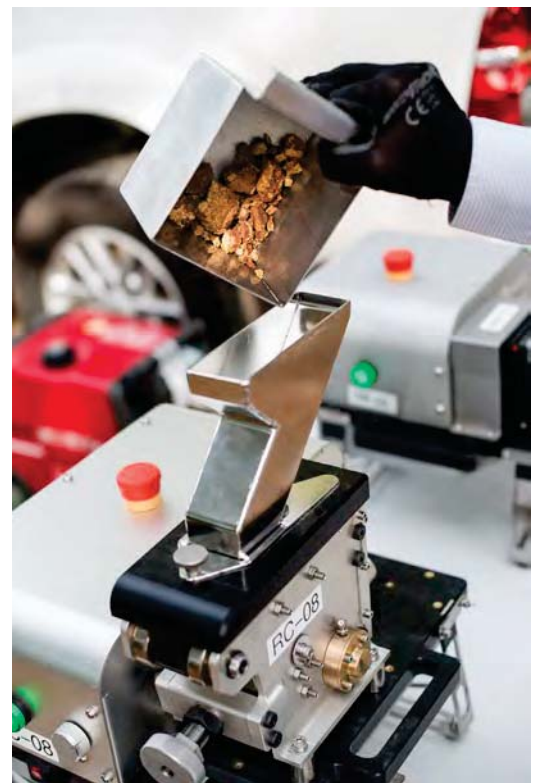

* depending of the material